


# 1 Enztec Straight Reamer Driver


## 2 Cleaning Instructions

### 3 DISASSEMBLE FOR CLEANING

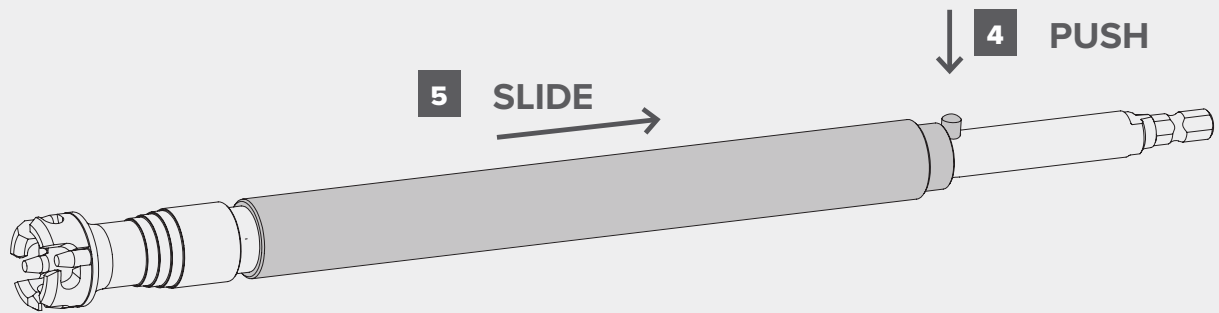

### 6 DOES NOT DISASSEMBLE FURTHER

### 7 PRE CLEANING

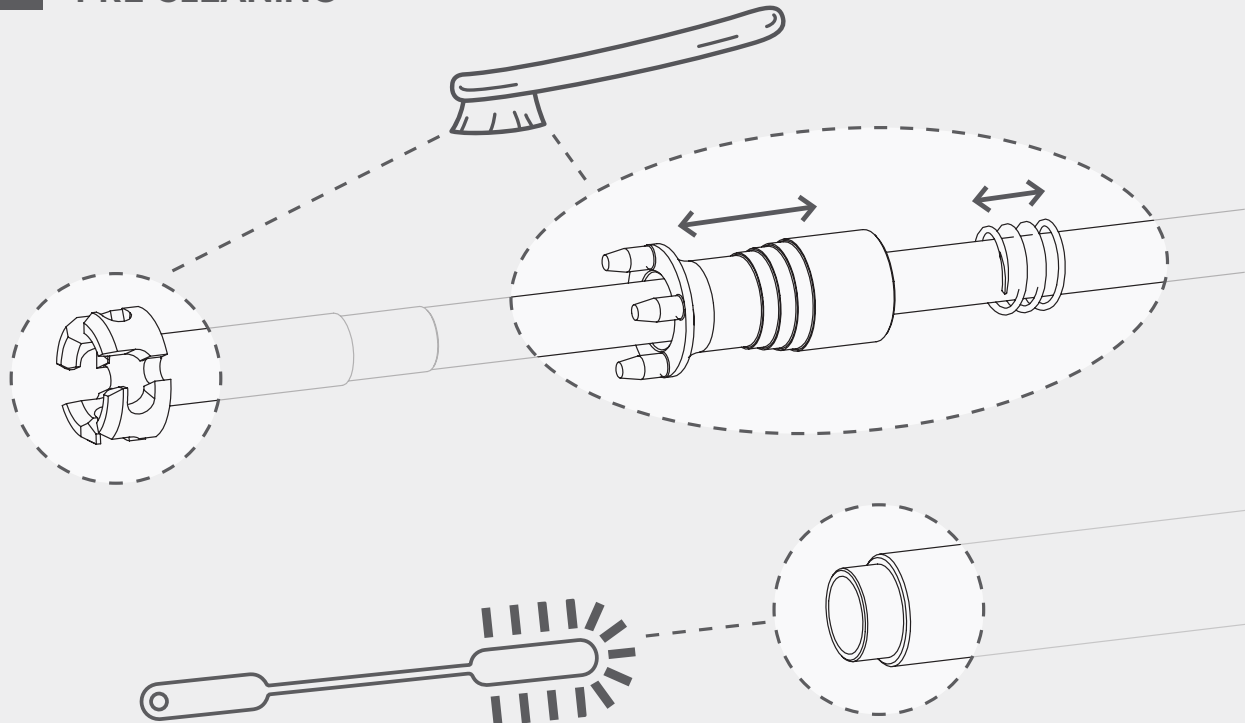

# Enztec Straight Reamer Driver



	1	2	3	4	5	6	7
EN	ENztec Straight Reamer Driver	Cleaning Instructions	Disassemble for Cleaning	Push	Slide	Does Not Disassemble Further	Pre Cleaning
BG	Отвертка за прав разширител Enztec	Инструкции за почистване	Разглобяване за почистване	Натискане	Плъзване	Не се разглобява допълнително	Предварително почистване
ES	Impulsor del escalafador recto de Enztec	Instrucciones de limpieza	Desmontar para limpiar	Empujar	Deslizar	No desmontar más	Prelavado
CS	Rovný zavaděč vrtáku Enztec	Pokyny k čištění	Demontujte pro čištění	Tlačit	Nasunout	Dále se nerozebírá	Předběžné čištění
DA	Enztec lige fræser-driver	Rengøringsanvisninger	Skil til rengøring	Tryk	Skub	Kan ikke adskilles yderligere	Forhåndsrensning
DE	Enztec Linearreibahlenantrieb	Reinigungsanleitung	Zum Reinigen demontieren	Drücken	Schieben	Nicht weiter demontierbar	Vorreinigung
ET	Enztec hõõritsa siige juhtvahend	Puhastusjuhised	Lahti võtmine Puhastamiseks	Lükake	Libistage	Ei saa rohkem lahti võtta	Eelpuhastamine
EL	Ευθύς οδοντός γλυφάδου Enztec	Οδηγίες καθαρισμού	Αποσυμφορόηση Για καθαρισμό	Ωθήστε	Ολισθήστε	Δεν αποσυμφορολογείται περαιτέρω	Προκαθαρισμός
FR	Mandrin pour alésoir droit Enztec	Instructions de nettoyage	Démonter pour nettoyer	Pousser	Faire glisser	Ne se démonte pas plus	Prénettoyage
HR	Ravna vodilica za razvrtlač Enztec	Upute za čišćenje	Rastavite Za čišćenje	Pogurni	Pomakni	Ne može se dodatno rastaviti	Prethodno čišćenje
IT	Guida alesatore dritto Enztec	Istruzioni per la pulizia	Smontare Per la pulizia	Spingere	Far scorrere	Non smontare ulteriormente	Pre-pulizia
LV	Enztec taisnās frēzes dzinis	Tīrīšanas instrukcijas	Demontēt Tīrīšanai	Stumt	Bīdīt	Nav papildus izjaucams	Iepriekšēja tīrīšana
LT	„Enztec“ tiesaus plėstuvo sukutvas	Valymo instrukcijos	Išardykite valymui	Stumti	Nustumti	Daugiau neišardomas	Pirminis valymas
HU	Enztec egyenes maróbehajtó	Tisztítási utasítások	Szétzerelés tisztításhoz	Nyom	Csúsztat	Tovább nem szerelhető szét	Előtisztítás
NL	Enztec rechte bedieningshendel voor frees	Reiniging instructies	Demonteer voor reiniging	Duwen	Schuiven	Demonteer niet verder	Voorwas
NO	Enztec rett reamerdriver	Rengjøringsinstruksjoner	Demonteres for rengjøring	Trykk	Skyv	Ikke demonter ytterligere	Forhåndsrensing
PL	Prosty prowadnik rozwiertaka firmy Enztec	Instrukcje czyszczenia	Zdemontuj do czyszczenia	Pchnij	Wsuń	Nie podlega dalszemu demontażowi	Czyszczenie wstępne
PT	Chave do escareador reta Enztec	Instruções de limpeza	Desmontar para limpeza	Empurrar	Deslizar	Sem desmontagem adicional	Pré-limpeza
RO	Dispozitiv de acționare alezor drept Enztec	Instrucțiuni de curățare	Dezasamblați pentru curățare	Împingeți	Glisați	Nu demontați mai departe	Curățarea prealabilă
SK	Pohon rovného výstředníka Enztec	Pokyny na čistenie	Demontujte na čistenie	Tlačiť	Posunúť	Ďalej sa nerozoberá	Predbežné vyčistenie
SL	Ravno vodilo povitala Enztec	Navodila za čiščenje	Za čiščenje razstavite	Potisniti	Podrsati	Nadaljnje razstavljanje ni možno	Predčiščenje
FI	Suora Enztec-riimeriohjain	Puhdistusohjeet	Pura puhdistusta varten	Työnnä	Liuta	Ei voida purkaa pidemmälle	Esipuhdistus
SV	Enztec rak drivenhet till bortsch	Rengöringsanvisningar	Demontera för rengöring	Tryck	Skjut	Kan inte monteras isär ytterligare.	Förrengöring
TR	Enztec düz oyucu sürücüsü	Temizleme talimatları	Temizlik için sökün	İt	Kaydır	Daha fazla sökmezin	Ön temizleme

